



Aplikacija za upravljanje dijabetesom

Upute za uporabu

Aplikacija za upravljanje dijabetesom

Accu-Chek[®] Connect

Pregled

Aplikacija za upravljanje dijabetesom Accu-Chek Connect (u daljnjem tekstu aplikacija) osmišljena je kako bi vam pomogla u:

- prijenosu podataka s aparata za mjerenje glukoze u krvi Accu-Chek;
- prijenosu podataka na vaš račun mrežnog sustava za upravljanje dijabetesom Accu-Chek Connect (mrežni račun) i po želji u dijeljenju tih podataka sa liječnikom ili zdravstvenim djelatnikom;
- dobivanju savjeta o bolusu;
- obavljanju strukturiranih testova (3-dnevni profil ili Testiranje u parovima).
- općenitoj kontroli dijabetesa pomoću bilježenja kontekstualnih podataka.

Kliknite veze ispod za prikaz odgovarajućeg odjeljka:

[Odricanje odgovornosti](#)

[Kontakt](#)

[Osnove aplikacije](#)

[-Mrežni račun](#)

[-Uparivanje aparata](#)

[-Savjet o bolusu](#)

[Strukturirani testovi](#)

[Ostale postavke](#)

[-Medicinski detalji](#)

[-Dodavanje podataka](#)

[-Izvjешćivanje o podacima](#)

[-Dijeljenje podataka](#)

Odricanje odgovornosti

Korisnici ovog softvera rezultate trebaju tumačiti u skladu sa svojom povijesti bolesti i simptomima te ne bi smjeli mijenjati terapiju bez savjetovanja s liječnikom ili drugim kvalificiranim zdravstvenim djelatnikom.

Neobavljanje mjerenja glukoze u krvi može dovesti do odgode u donošenju odluka o liječenju i prouzročiti teško zdravstveno stanje. Ako vam se čini da vaše fizičko stanje ne odgovara vrijednosti glukoze u krvi koja se prikazuje, ponovite mjerenje. Ispravne tehnike mjerenja potražite u uputama za uporabu aparata. Ako ne možete obaviti mjerenje glukoze u krvi, obratite se liječniku.

Deinstalacijom aplikacije bez izrade pričuvne kopije podataka doći će do gubitka svih vaših podataka iz prošlosti. Uvijek izradite pričuvnu kopiju podataka prije ažuriranja aplikacije ili nadogradnje operacijskog sustava mobilnog uređaja.

Savjetujte se sa liječnikom o radnjama koje morate poduzeti kad upotrebljavate više razdoblja i putujete u drugu vremensku zonu.

Ova aplikacija namijenjena je za samo jednog korisnika. Ne dijelite aplikaciju s drugim korisnicima.

Savjet o bolusu Accu-Chek kao dio aplikacije za upravljanje dijabetesom Accu-Chek Connect namijenjen je za kontrolu dijabetesa računanjem doze inzulina ili unosa ugljikohidrata na temelju podataka koje korisnik unosi. Prije nego što izračun ugljikohidrata prepusti pacijentu, liječnik ili zdravstveni djelatnik mora aktivirati izračun bolusa i navesti ciljne parametre glukoze u krvi, omjera inzulina i ugljikohidrata te osjetljivosti na inzulin koji su specifični za pacijenta kako bi se ti podaci programirali u softver. Prije nego što izračun dodijeljene doze bolusa za obrok prepusti pacijentu (od najmanje 22 godine starosti), liječnik ili zdravstveni djelatnik mora aktivirati izračun bolusa i navesti ciljne parametre glukoze u krvi, dodijeljene doze inzulina za obrok i osjetljivosti na inzulin koji su specifični za pacijenta kako bi se ti podaci programirali u softver.

U nekim zemljama liječnik ili zdravstveni djelatnik moraju prije uporabe propisati Savjet o bolusu Accu-Chek i navesti parametre glukoze u krvi, osjetljivosti na inzulin i faktoru ugljikohidrata i inzulina (broje se samo Savjeti o bolusu "Izračun ugljikohidrata") koji su specifični za pacijenta kako bi se programirali u Savjet o bolusu Accu-Chek.

Kontakt



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Osnove aplikacije

Za najbolje korištenje aplikacijom potrebno je postaviti nekoliko ključnih značajki. Neke od njih su:

- Mrežni račun
- Uparivanje aparata
- Savjet o bolusu

Za postavljanje osnova aplikacije u izborniku zaslona Početno odaberite Postavke.

Mrežni račun

Tvorničke postavke za vaš mrežni račun Accu-Chek Connect mogu se postaviti na zaslonu mrežnog računa. Mrežni račun pomaže vam u boljoj kontroli dijabetesa tako što vam omogućuje prikaz podataka unesenih na mobilnom uređaju.

Za izradu mrežnog računa ili ažuriranje postavki:

1. Odaberite izbornik ().
2. Odaberite **Pošalji na račun na mreži**.
3. Ako **već imate** mrežni račun za Accu-Chek Connect, unesite korisničko ime i lozinku i prijedite na 6. korak.
4. Ako **nemate** mrežni račun za Accu-Chek Connect, odaberite vezu za izradu računa i slijedite upute na zaslonu za unos podataka o računu.
5. Nakon što dovršite unos podataka o računu, primit ćete potvrdu e-poštom. Odaberite mobilnu vezu u poruci e-pošte za potvrdu kako biste dovršili postupak izrade računa. U aplikaciji ste automatski prijavljeni na svoj mrežni račun. Ako je taj postupak prekinut i niste prijavljeni, možete unijeti korisničko ime i lozinku te odabrati **Prijava**.

6. Odaberite želite li da aplikacija šalje slike na vaš mrežni račun pomoću mobilne mreže ili samo kad ste spojeni na Wi-Fi mrežu.

Uparivanje aparata

Za prikaz svih kompatibilnih uređaja idite u trgovinu Google Play ili trgovinu aplikacijama iTunes.

Uparivanjem aparata za mjerenje glukoze u krvi bežičnom tehnologijom *Bluetooth*® omogućuje se prijenos vrijednosti glukoze u krvi s aparata na vaš mobilni uređaj. Kad aparat uparite s aplikacijom, podaci s aparata za mjerenje glukoze u krvi automatski se prenose u aplikaciju. Aplikacija će također automatski postaviti vrijeme na aparatu.

Za uparivanje aparata:

1. Odaberite izbornik ().
2. Odaberite Postavke.
3. Odaberite Uparivanje aparata.
4. Odaberite vrstu aparata (s više gumba, s jednim gumbom ili Accu-Chek Guide Me) koji ćete upariti.
5. Slijedite upute na zaslonu kako biste aparat prebacili u način za uparivanje.
6. U aplikaciji odaberite Dalje.
7. Odaberite identifikator aparata (ili „Accu-Chek“ ili „aparat“ iza čega slijedi serijski broj, ovisno o vašem aparatu).
8. Unesite PIN aparata pa odaberite Dovršeno / U redu.
9. Pogledajte zaslon za potvrdu uparivanja.

Prijenos podataka s aparata

Za prijenos rezultata mjerenja s aparata za mjerenje glukoze u krvi aparat mora biti unutar 2 metra (6 stopa) od mobilnog uređaja. Uobičajeno trajanje prijenosa može biti do 10 sekundi. Do automatskog prijenosa dolazi kad je na aparatu za mjerenje glukoze u krvi omogućeno Automatsko slanje.

Za automatski prijenos rezultata mjerenja:

1. Obavite mjerenje glukoze u krvi dok je mobilni uređaj uključen i unutar 2 metra (6 stopa) od aparata za mjerenje glukoze u krvi.
2. Dodijelite događaj rezultatu mjerenja glukoze u krvi tako da odaberete Komentar ili Dodaj komentar, ovisno o vašem aparatu, zatim odaberite događaj koji želite dodijeliti i odaberite U redu za slanje rezultata mjerenja.
3. Ako ne želite dodijeliti događaj, odaberite gumb sa strelicom natrag i poslat će se rezultat mjerenja.

Napomena: Dodavanje komentara nije dostupno na aparatima s jednim gumbom i aparatu Accu-Chek Guide Me. Rezultati se odmah prenose na aparatima s jednim gumbom.

Za ručni prijenos rezultata mjerenja glukoze u krvi (aparat s više gumba):

1. Obavite mjerenje glukoze u krvi dok je mobilni uređaj uključen i unutar 2 metra (6 stopa) od aparata za mjerenje glukoze u krvi.
2. Odaberite ikonu izbornika ().
3. Odaberite Preuzmi s uređaja.

4. Provjerite je li aparat u načinu rada za prijenos podataka (Odaberite Moji podaci, Prijenos podataka, Bežično).

Za ručni prijenos rezultata mjerenja glukoze u krvi (aparat s jednim gumbom ili Accu-Chek Guide Me):

1. Pritisnite gumb na bočnoj strani aparata (nemojte ga držati pritisnutim).
2. Aparat će pokušati prebaciti podatke nakon što se zaslon uključi.

Postavljanje savjeta o bolusu Accu-Chek

Savjet o bolusu (ili Savjet) izračunava dozu inzulina na osnovi doba dana, vaše vrijednosti glukoze u krvi, onoga što ste pojeli i ostalih događaja. Za uporabu Savjeta morate od liječnika primiti parametre za postavljanje i proći obuku. Kad dovršite temeljno postavljanje Savjeta, te i ostale postavke možete izmijeniti tako da u izborniku Postavke odaberete Savjet o bolusu.

Dodijeljena doza za obrok

Dodirnite Obrok kako biste promijenili vrijednost inzulina za svaku dodijeljenu dozu za obrok. Ta je opcija dostupna samo pri korištenju dodijeljene doze za obrok.

Za dodavanje Novog razdoblja:

1. Odaberite Razdoblja, Ciljni rasponi, Faktori ugljikohidrata i Osjetljivosti na inzulin.
2. Odaberite gumb + kako biste otvorili novo razdoblje, ažurirajte početno vrijeme pa odaberite Postavi.
3. Po potrebi ažurirajte Ciljni raspon, Faktor ugljikohidrata i Osjetljivost na inzulin pa odaberite Spremi.

Napomena: Faktor ugljikohidrata pojavljuje se samo kad brojite ugljikohidrate.

Porast tijekom obroka

Porast tijekom obroka je porast vrijednosti glukoze u krvi tijekom ili nakon obroka koja se smatra dopuštenom unutar određenog raspona, iako je uzet bolus.

Za ažuriranje postavke Porast tijekom obroka:

1. Odaberite Porast tijekom obroka i količina užine ili Dodijeljena doza za obrok i porast tijekom obroka ako upotrebljavate Dodijeljenu dozu za obrok.
 2. Odaberite odjeljak za unos teksta opcije Porast tijekom obroka i ažurirajte količinu uobičajenog porasta vaše glukoze u krvi nakon obroka.
 3. Odaberite odjeljak za unos teksta opcije Količina užine kako biste ažurirali količinu ugljikohidrata koja pokreće porast tijekom obroka.
- Napomena:** Količina užine pojavljuje se samo kad brojite ugljikohidrate.
4. Odaberite Dovršeno.

Detalji o inzulinu

Detalji o inzulinu uključuju naziv/vrstu bolus inzulina, maks. bolus, odgodu, vrijeme djelovanja i porast inzulina.

Za ažuriranje Detalja o inzulinu:

1. Odaberite Detalji o inzulinu.
2. Odaberite odjeljak za unos teksta opcije Maks. bolus, na tipkovnici aplikacije unesite potrebni maksimum pa odaberite Dovršeno.
3. Odaberite odjeljak za unos teksta opcije Odgoda, unesite trajanje prije nego što inzulin koji ste definirali počne snižavati vrijednosti glukoze u krvi pa odaberite Postavi.
4. Odaberite odjeljak za unos teksta opcije Vrijeme djelovanja, unesite trajanje od početka bolusa do očekivanog povratka vrijednosti glukoze u krvi na ciljne vrijednosti pa odaberite Postavi.
5. Odaberite odgovarajući Porast inzulina.
6. Odaberite padajući izbornik za brzodjelujući ili kratkodjelujući inzulin pa odaberite odgovarajući inzulin.
7. Odaberite Spremi.

Napomena: Prije uzimanja velikih doza inzulina zatražite savjet liječnika / zdravstvenog djelatnika.

Sport

Sport uključuje unaprijed postavljene i prilagođene sportske događaje koji se mogu iskoristiti u vašoj preporuci Savjeta o bolusu.

Za ažuriranje Sportova:

1. Odaberite Sportovi.
2. Odaberite odjeljak za unos teksta za sport koji želite ažurirati, promijenite postotak u kojem sport utječe na količinu inzulina koju trebate pa odaberite Postavi.
3. Ponovite ovaj postupak dok ne ažurirate sve sportove koje želite promijeniti.
4. Kad su svi sportovi ažurirani, odaberite Spremi.

Za dodavanje novih sportova:

1. Odaberite + Dodaj sport.
2. Odaberite odjeljak za unos teksta opcije Naziv, unesite naziv sporta pa odaberite Dovršeno.
3. Po potrebi odaberite Povećajte za (+) ili Smanjite za (-).
4. Ažurirajte postotak u kojem sport utječe na vašu potrebu za inzulinom.
5. Kad su svi podaci uneseni, odaberite Postavi.

Zdravstveni događaji

Zdravstveni događaji uključuju unaprijed postavljene i prilagođene zdravstvene događaje koji se mogu iskoristiti u vašoj preporuci Savjeta o bolusu

Za ažuriranje Zdravstvenih događaja:

1. Odaberite Zdravstveni događaji.
2. Odaberite zdravstveni događaj koji želite urediti, ažurirajte postotak u kojem zdravstveni događaj utječe na vašu potrebu za inzulinom i odaberite Postavi.

Za dodavanje novih Zdravstvenih događaja:

1. Odaberite +Dodaj zdravstveni događaj
2. Unesite naziv zdravstvenog događaja i odaberite Dovršeno/postavi.
3. Ažurirajte postotak u kojem zdravstveni događaji utječu na količinu inzulina koju trebate pa odaberite Postavi.

4. Odaberite Spremi.

Uporaba savjeta o bolusu Accu-Chek

Napomena: Prilikom prve uporabe ili prve uporabe nakon ponovne instalacije aplikacije, aktivni inzulin možda neće biti točan zbog nedostatka prošlih podataka o inzulinu.

Svakako zabilježite sav bolus inzulin koji uzimate zajedno s vremenom i datumom. To uključuje i inzulin koji nije u Savjetu. Potpuni podaci o inzulinu potrebni su radi osiguranja točnosti Savjeta o bolusu.

Nakon mjerenja glukoze u krvi i prijenosa podataka nova bi se vrijednost trebala prikazati na početnom zaslonu. Očitavanje je medicinski valjano za Savjet o bolusu u trajanju do 15 minuta (brojač vremena prikazuje preostalo vrijeme).

1. Odaberite gumb Savjet.
2. Po želji dodajte ugljikohidrate i ostale podatke za savjet o bolusu pa odaberite Dalje.
3. Prikazat će se preporuka za vaš inzulin. Unesite koliko ćete bolus inzulina zapravo ubrizgati.
4. Potvrdite tako da odaberete Spremi.

Napomena: Aplikacija ne daje savjet o bolusu za očitavanja HI. Ako dobijete očitavanje HI, pokušajte ponovno provjeriti GUK, provjeriti ketone i inzulin i savjetovati se sa liječnikom.

Ako je vaša glukoza u krvi ispod granice hipoglikemije (tvornička postavka može se izmijeniti u postavkama za glukozu u krvi), ne daje se savjet o bolusu. Umjesto toga, dobit ćete preporuku da pojedete brzodjelujuće ugljikohidrate te, samo za brojenje ugljikohidrata, izračun količine ugljikohidrata koju morate pojesti kako biste podigli glukozu u krvi u ciljni raspon.

- Prikazat će se vaša preporuka „pojedite ugljikohidrate“.
- Unesite količinu ugljikohidrata koju ćete zapravo pojesti.
- Potvrdite tako da odaberete Spremi.

Napomena: Korisnici opcije Dodijeljena doza za obrok Savjeta o bolusu primit će samo statičnu poruku da pojedju brzodjelujuće ugljikohidrate. Kako biste unijeli brzodjelujuće ugljikohidrate, idite na zaslon Dodaj i tu informaciju unesite u područje Obrok.

Napomena: Aplikacija ne daje savjet na temelju očitavanja LO. Ako dobijete očitavanje LO, ponovno izmjerite GUK. Obratite se liječniku.

Napomena: Savjetujte se sa liječnikom u vezi sa savjetom o bolusu ako vam je aplikacija nedostupna (primjerice, baterija mobilnog uređaja je prazna).

Strukturirani testovi.

3-dnevni profil

3-dnevni profil (3DP) pruža vam lak i praktičan način bilježenja i praćenja rezultata mjerenja prije i nakon obroka i u vrijeme za spavanje tijekom trodnevnog razdoblja i prikazuje vam kako obroci i aktivnosti utječu na vašu glukozu u krvi. Potrebno je barem pet od sedam unosa za glukozu u krvi (unutar 24 sata) kako biste dovršili dan. Možete preskočiti jedan ili dva dana pa je potrebno tri od pet dana kako biste dovršili 3DP.

Kako biste započeli novi 3DP:


1. Odaberite Izbornik.

2. Odaberite Strukturirani testovi.
3. Odaberite Zakaži novi test i po želji ažurirajte podatke o obroku i vremenu za spavanje.
4. Odaberite opciju Odaberite datum početka, postavite datum početka i odaberite Dovođeno.
5. Ako želite ažurirati postavke podsjetnika ili promijeniti ciljne raspone za 3DP, odaberite Dodatne postavke.

Napomena: Prema tvorničkim postavkama, ciljni raspon za 3DP isti je kao i ciljni raspon za ostala izvješća. Ako se prebacite na dvojne ciljne raspone, oni se upotrebljavaju samo u izvješću 3DP.

Kako biste se koristili opcijom 3DP, slijedite ove upute:

- Obavite mjerenje glukoze u krvi na temelju podsjetnika.
- Vrijeme mjerenja Prije obroka može biti između 2 sata prije i 2 sata poslije zakazanog vremena obroka. Vrijeme mjerenja Nakon obroka može biti od 1 do 3 sata poslije stvarnog vremena mjerenja Prije obroka.

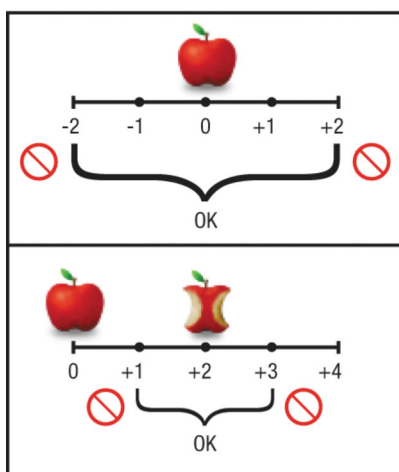

- Dodajte glukozu u krvi, obrok i ostale podatke.
- Pogledajte grafikone trenda za glukozu u krvi na početnom zaslonu i u Izvješćima.

Kako biste zaustavili 3DP, slijedite ove upute:

3DP završava 24 sata nakon početka posljednjeg dovršenog dana. Za ranije zaustavljanja dodirnite i držite aktivni 3DP.

Napomena: Ako je pokrenut 3DP i prijavljeni ste na mrežni račun, svi se podaci automatski šalju samo na kraju svakog dovršenog dana (24 sata ili kad počne sljedeći dan).

Testiranje u parovima (TUP)

Testiranje u parovima (TUP) jednostavan je alat koji vam pomaže u pregledu promjena u glukozu u krvi prije i nakon događaja. TUP možete upotrebljavati 7 dana kako biste se usredotočili na to kako jedan dio vaše dnevne rutine utječe na vaše vrijednosti glukoze u krvi. Na primjer:

- Kako određena hrana ili piće utječu na vaše vrijednosti glukoze u krvi?
- Kako određena vrsta sporta utječe na vaše vrijednosti glukoze u krvi?


Kako biste pokrenuli TUP, slijedite ove upute:

1. Odaberite Izbornik.
2. Odaberite Strukturirani testovi.

3. Odaberite karticu TUP.
4. Odaberite Pokreni novi test.
5. Odaberite Testiranje u parovima.
6. Odaberite događaj koji želite testirati i odaberite Postavi.

Kako biste upotrebljavali TUP, slijedite ove upute:

- Obavite mjerenje glukoze u krvi prije i nakon događaja.
- Vrijeme mjerenja Prije obroka može biti između 2 sata prije i 2 sata poslije zakazanog vremena. Vrijeme mjerenja Nakon obroka može biti od 1 do 3 sata poslije stvarnog vremena mjerenja Prije obroka.

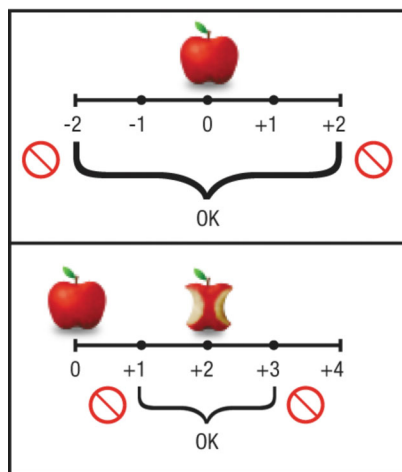

- Dodajte podatke o glukozi u krvi, obroku i događaju.
- Promjene glukoze u krvi prikazuju se na početnom zaslonu i u Izvješćima.

Kako biste zaustavili TUP, slijedite ove upute:

TUP završava 24 sata nakon posljednjeg para. Kako biste ga ranije okončali, odaberite i držite aktivni TUP.

Napomena: Ako je pokrenut TUP i prijavljeni ste na mrežni račun, svi se podaci automatski šalju samo na kraju svakog dovršenog para (24 sata ili kad počne sljedeći par).

Ostale postavke

Podsjetnici

Podsjetnici su tonovi i vibracije kojima vas se podsjeća na obavljanje određene zadaće (kao što je uzimanje lijeka ili doze inzulina). Postoje zasebni potvrdni okviri za omogućenje podsjetnika i za postavljanje ponavljanja.

Mjerne jedinice

Aplikacija po tvorničkim postavkama upotrebljava odgovarajuće mjerne jedinice za vašu lokaciju, no postavka se može prilagoditi. Može odabrati sljedeće prilagođene mjerne jedinice:

- Mjerne jedinice za glukozu u krvi*
- Jedinica za kalorije
- Jedinice za ugljikohidrate*
- Jedinice težine
- Jedinice za krvni tlak

***Napomena:** Jedinice za glukozu u krvi i ugljikohidrate ne mogu se mijenjati dok je uključen Savjet.

Vremena obroka

Vremena obroka pohranjena u aplikaciji pokazuju kad obično jedete obroke. Ta su vremena tvorničke postavke za TUP i 3DP testiranje.

Promijeni redoslijed podataka

Redoslijed kojim se detalji kao što su razina energije, sport, inzulin i zdravstveni događaji pojavljuju na zaslonu za dodavanje može se prilagoditi tako da se stavke kojima se najčešće koristite nalaze na vrhu popisa. Redoslijed koji postavite također se upotrebljava za podatke koji se prikazuju na popisu i na početno zaslonu (glukoza u krvi i sljedeće dvije odabrane stavke prikazuju se u standardnom prikazu).

Napomena: Kad je omogućen Savjet, u svakom se trenutku prikazuju glukozu u krvi i inzulin. Vrijednost dodijeljenog obroka ili ugljikohidrati isto tako se uvijek prikazuju, ovisno o vrsti Savjeta o bolusu koji se koristi.

Osobni podaci

Vaše ime, prezime i datum rođenja potrebni su kako biste mogli dijeliti trend, 3DP i izvješća o TUP-u.

Registracija

Registriranjem aparata za mjerenje glukoze u krvi putem aplikacije omogućujete nam da vas obavještavamo o važnim informacijama o jamstvu, ažuriranjima i podršci.

Medicinski detalji

Postavke za glukozu u krvi

Postavke Ciljni raspon glukoze u krvi i Hipoglikemija upotrebljavaju se za određivanje načina na koji se podaci prikazuju u izvješćima i na početnom zaslonu. Na primjer, zeleno znači unutar ciljnog raspona, plavo znači iznad, a crveno ispod granice hipoglikemije. Žuta se upotrebljava u slučaju razmaka između donje vrijednosti ciljnog raspona i granice hipoglikemije.

Inzulin

Kako biste olakšali unos podataka, možete postaviti najviše tri različita zadana tipa inzulina za korištenje u aplikaciji. Tipovi inzulina mogu se postaviti za:

- INZ 1: Bolus (brzodjelujući ili kratkodjelujući) inzulin.
- INZ 2: Bazalni (dugodjelujući) inzulin.
- INZ 3: Ostali inzulini ili neka od prethodne dvije kategorije.

Napomena: Opcija INZ 3 uklanja se kad se aktivira Savjet o bolusu.

Dodavanje podataka.

Vaši dnevni rezultati mjerenja glukoze u krvi, razine energije, sport i ostali detalji mogu se ručno unijeti u aplikaciju.

1. Na početnom zaslonu odaberite + Dodaj.
2. Unesite podatke mjerenja glukoze u krvi, razinu energije, oznaku događaja, veličinu obroka, ugljikohidrate, inzulin, bilješke i ostale detalje pa odaberite Spremi.

Dodavanje slike

Možete dodati slike podatkovnim unosima kao vidni podsjetnik i kao pomoć u davanju konteksta unosima na popis.

Za dodavanje slika:

1. Pomaknite se na dno zaslona Dodaj novi unos.
2. Odaberite sliku iz galerije mobilnog uređaja ili upotrijebite kameru i snimite sliku.

Napomena: Za svaki unos na popisu dopušteno je do 6 slika.

Zaštita podataka

Radi zaštite vaših osobnih podataka podaci na mobilnom uređaju pohranjuju se u šifriranoj datoteci. Pristup mobilnom uređaju uvijek biste trebali štititi jakim lozinkom.

Tijekom prijenosa vaših podataka mogu se upotrebljavati nešifrirana e-pošta, tekst i/ili softver na vašem mobilnom uređaju, a podaci se šalju preko mreža koje nisu pod nadzorom tvrtke Roche. Ako korisnik odluči prenositi podatke na taj način, tvrtka Roche ni na koji način ne snosi odgovornost za sigurnost ili pouzdanost takvih prijenosa.

Izvyješćivanje o podacima

Izvyješća o trendovima

Izvyješća o trendovima prikazuju vaše trendove za glukozu u krvi pomoću podataka s popisa.

Za prikaz izvješća o trendu:

1. Odaberite Izbornik.
2. Odaberite Grafikon trenda.
3. Postavite razdoblje izvješća o trendu.
4. Odaberite kako želite da se podaci prikazuju.
5. Za dijeljenje podataka odaberite Podijeli. Dijeljenje vam omogućuje da pošaljete (e-poštom/tekstom), ispišete ili spremite PDF verziju izvješća o trendu.

Popis

Unosi u popis automatski se pohranjuju redoslijedom vremena i datuma tako da se najprije prikazuju najnoviji zapisi.

Za uređivanje unosa u popis:

1. Na početnom zaslonu odaberite Popis.
2. Odaberite unos u popis koji želite urediti pa odaberite Uredi.
3. Kad ste gotovi s uređivanjem, odaberite Dovořeno, Spremi pa Zatvori.

Dijeljenje podataka

Aplikacija vam za dijeljenje podataka omogućuje uporabu SMS poruka ili mrežnog računa za Accu-Chek Connect.

Za dijeljenje zapisa glukoze u krvi putem SMS poruke:

1. Odaberite Postavke.
2. Odaberite SMS za glukozu u krvi.
3. Odaberite Dijeli zabilježene vrijednosti GUK SMS-om i/ili Uključi ime i datum rođjenja u poruci.
4. Primatelje dodajte ručno ili s popisa kontakata.

Slanje podataka na mrežni račun za Accu-Chek Connect

Podaci se automatski šalju kad se prijavite. Ako ste dulje vrijeme bili izvan mreže, možete provjeriti jesu li podaci poslani.

Za slanje podataka:

1. Odaberite izbornik ().
2. Odaberite Pošalji na račun na mreži.

Napomena: Kad je pokrenut strukturirani test, svi se podaci šalju automatski tek na kraju svakog dovršenog dana (ili para).

Pričuvno kopiranje podatka

Pričuvno kopiranje omogućuje vam slanje poruke e-pošte s kopijom vaših podataka na željenu adresu e-pošte.

1. Odaberite Postavke.
2. Odaberite Dijeljenje podataka.
3. Odaberite Pričuvna kopija.
4. Odaberite E-pošta za pričuvno kopiranje.
5. Unesite adresu e-pošte primatelja.
6. Odaberite Pošalji.

Za vraćanje podataka na mobilni uređaj:

1. Upotrijebite Pričuvno kopiranje podataka za slanje kopije podataka na svoj račun e-pošte.
2. Na mobilnom uređaju otvorite poruku e-pošte s pričuvnom kopijom i pomoću aplikacije otvorite pričuvnu datoteku iz privitka kako biste uvezli podatke.
3. Ako napravite pričuvnu kopiju podataka tijekom strukturiranog testa, podaci o testu će se spremiti, no strukturirani test u datotekama pričuvne kopije bit će neaktivan i neće se moći ponovno pokrenuti s lokacije pričuvne kopije.

Značenje simbola

U ovim uputama za uporabu možete naići na sljedeće simbole koji se ovdje prikazuju zajedno sa značenjima.



Proizvođač



Značenje simbola

U ovim uputama za uporabu možete naići na sljedeće simbole koji se ovdje prikazuju zajedno sa značenjima.

	Proizvođač
	Ovaj proizvod odgovara zahtjevima europske Direktive 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima.

© 2020 Roche Diabetes Care

07250444011-0620

 Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT i ACCU-CHEK GUIDE ME su zaštitni znakovi tvrtke Roche.

Verbalni žigovi i logotipi Bluetooth® registrirani su žigovi grupe Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka Roche upotrebljava ih po licenci. Svi ostali nazivi proizvoda i marke pripadaju svojim vlasnicima.

 0123