

ACCU-CHEK®

SmartGuide Predict



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

APLICAÇÃO ACCU-CHEK SMARTGUIDE PREDICT


Índice

1 Sobre este manual.....	3
2 Informações sobre o produto.....	4
2.1 Utilização prevista.....	4
2.2 Indicações de utilização.....	4
2.3 Utilizadores previstos.....	4
2.4 Contraindicações.....	4
2.5 Limitações.....	4
2.6 Educação e formação.....	4
2.7 Principais características.....	5
3 Informações gerais sobre a segurança.....	8
4 Utilizar a aplicação.....	9
4.1 Pré-requisitos para utilizar a aplicação.....	9
4.2 Notas da versão.....	9
5 Começar.....	10
5.1 Instalar e desinstalar a aplicação.....	10
5.2 Iniciar sessão na aplicação Predict.....	10
5.3 Configuração da aplicação Accu-Chek SmartGuide.....	10
6 Configurar o dispositivo móvel.....	12
6.1 Requisitos gerais.....	12
6.2 Proteção do acesso.....	12
7 Ecrã inicial.....	13
7.1 Elementos de navegação.....	14
8 Predição de glicose.....	15
8.1 Mensagens de erro de predição de glicose.....	15
8.2 Predição de glicose baixa.....	16
8.3 Exceções da Predição de glicose baixa.....	16
9 Predição de glicose baixa noturna.....	17
9.1 Mensagens de erro de Predição de glicose baixa noturna.....	18
9.2 Ativar a Predição de glicose baixa noturna.....	19
10 Padrões de glicose.....	20
10.1 Tipos de padrões de glicose.....	20
10.2 Possíveis causas dos padrões de glicose baixos e altos.....	22
10.3 Definir um lembrete de padrão de glicose.....	23
10.4 Adicionar uma nota.....	23
10.5 Ativar a notificação para o Resumo da semana.....	23
11 Exportar relatório.....	25
12 Definições da aplicação.....	26
13 Resolução de problemas.....	27
13.1 Resolução de problemas.....	27
13.2 Visão geral das notificações.....	27
14 Assistência a clientes.....	28
15 Dados técnicos.....	29
16 Explicação dos ícones da aplicação.....	30
17 Significado dos símbolos.....	32


Para se familiarizar com todas as funções da aplicação, leia as instruções com cuidado. Se a aplicação não funcionar de acordo com o previsto, consulte a secção de resolução de problemas deste manual de utilização. Se, mesmo assim, não conseguir encontrar o que procura, contacte a assistência a clientes.

Este manual de utilização destaca as seguintes informações de uma forma especial:

ADVERTÊNCIA

Uma  **ADVERTÊNCIA** indica um risco grave previsível.

PRECAUÇÃO

Uma  **PRECAUÇÃO** descreve uma medida a tomar para utilizar o produto em segurança e com eficácia ou para prevenir danos no produto.

NOTA

Uma **NOTA** inclui informações úteis e dicas.

2.1 Utilização prevista

A aplicação Accu-Chek® SmartGuide Predict é uma aplicação de software para pessoas com diabetes (PcD) que utilizam um sistema de monitorização contínua da glicose (MCG) conectado.

A aplicação Accu-Chek SmartGuide Predict é:

- uma ferramenta de gestão da informação que ajuda as PcD a visualizar e analisar os seus dados de diabetes.
- destina-se a ser um auxiliar na gestão diária da diabetes das PcD, para ser utilizada em casa.
- uma aplicação complementar da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

2.2 Indicações de utilização

A aplicação Accu-Chek SmartGuide Predict destina-se a ser utilizada em casa, diariamente.

A aplicação Accu-Chek SmartGuide Predict destina-se a analisar dados de monitorização contínua da glicose (MCG) anteriormente obtidos, para apresentar uma predição de valores de MCG futuros.

O funcionamento apropriado desta aplicação depende de um dispositivo móvel compatível com definições adequadas. Para obter as informações mais recentes sobre dispositivos móveis compatíveis, toque em

<https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>.

2.3 Utilizadores previstos

Os utilizadores previstos são indivíduos que são:

- Adultos, com 18 ou mais anos de idade
- Pessoas com diabetes mellitus

2.4 Contraindicações

A aplicação não se destina a controlar quaisquer funções ou modificar quaisquer dados dos dispositivos conectados.

A aplicação não se destina a substituir o visor principal dos dispositivos conectados (como aparelhos de medição da glicemia, canetas de insulina ou dados de MCG na respetiva aplicação para MCG).

Os pacientes não devem alterar a sua terapia com base nos dados apresentados sem consulta prévia com o seu profissional de saúde.

2.5 Limitações

A aplicação Accu-Chek SmartGuide Predict tem de receber valores de MCG da pessoa com diabetes em tempo real.

As interrupções da recolha de dados de MCG podem dar origem a um subdesempenho das funcionalidades.

2.6 Educação e formação

Esta aplicação pode ser utilizada sem necessidade de educação ou formação prévias.

2.7 Principais características

Para que a aplicação Predict funcione corretamente, terá de configurar o sensor de MCG. Siga os passos indicados no capítulo Calibrar o sensor, do manual de utilização da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

Para receber a primeira predição de glicose é necessário transferir, no mínimo, 1 hora ininterrupta de dados de MCG. Para prever a probabilidade de ter glicose baixa durante a noite também é necessário, pelo menos, 1 dia de dados.

Esta secção apresenta uma panorâmica geral das principais funcionalidades da aplicação:

- Predição de glicose
- Predição de glicose baixa
- Predição de glicose baixa noturna
- Padrões de glicose
- Notificações personalizáveis
- Exportar relatório
- Ecrã inicial
- Transferência de dados
- Integração plena com a aplicação Accu-Chek SmartGuide

Predição de glicose

A aplicação Predict recolhe e utiliza informações da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

A sua predição de glicose para as 2 horas seguintes será apresentada assim que o sensor de MCG estiver corretamente configurado e um mínimo de 1 hora ininterrupta de dados de MCG tiver sido transferida da aplicação Accu-Chek SmartGuide para esta aplicação.

Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte o capítulo Predição de glicose.

Predição de glicose baixa

A aplicação deteta e notifica o utilizador de uma possível ocorrência de glicose baixa em 30 minutos. Por predefinição, a notificação *Glicose baixa em breve!* já está ativada quando abre a aplicação pela primeira vez. Pode aceder a **Definições de notificação** a partir do **Menu** para desativá-la. Mesmo assim, o cartão Predição de glicose baixa continua a ser apresentado no ecrã inicial da aplicação.

A notificação *Glicose baixa em breve!* aparece no ecrã de bloqueio, ou quando passa o dedo para baixo a partir da parte superior de qualquer outro ecrã. Toque na notificação para obter mais detalhes e indicações sobre eventuais medidas que pode tomar.

A predição de glicose baixa só funciona quando o alarme de glicose baixa estiver definido para valores entre 60 mg/dL (3,3 mmol/L) e 100 mg/dL (5,5 mmol/L) na aplicação Accu-Chek SmartGuide. Esta notificação não funciona se o seu alarme de glicose baixa for definido acima de 100 mg/dL (5,5 mmol/L).

Para mais informações sobre esta notificação, consulte o capítulo Predição de glicose.

Predição de glicose baixa noturna

Esta funcionalidade prevê a probabilidade de o utilizador ter glicose baixa durante a noite, permitindo-lhe decidir que medidas tomar antes de se deitar.

Ter glicose baixa significa que o valor de glicose poderá descer abaixo dos 70 mg/dL (3,9 mmol/L).

Se ativar esta funcionalidade e ligar a notificação, poderá receber a notificação *Predição de glicose baixa noturna!* se houver uma probabilidade alta de ter glicose baixa enquanto estiver a dormir. A aplicação Predict precisa de pelo menos 1 dia de dados para efetuar predições.

Também pode configurar a funcionalidade Predição de glicose baixa noturna e, quando pretender, obter este cálculo da aplicação.

Para mais informações sobre a ocorrência de glicose baixa durante a noite, consulte o capítulo Predição de glicose baixa noturna.

Padrões de glicose

Esta funcionalidade identifica eventos glicémicos recorrentes que ocorrem durante um dia ou uma semana (de segunda-feira a domingo). Isto permite ao utilizador tomar medidas práticas para ajudar a manter os seus níveis de glicose dentro do intervalo.

Assim que a aplicação Predict recebe os dados de MCG da aplicação Accu-Chek SmartGuide, os padrões detetados das últimas 24 horas são apresentados por baixo do gráfico no ecrã inicial.

Os padrões são apresentados por ordem decrescente, começando nos que apresentam maior risco para a saúde, como os padrões muito baixos ou baixos. Além disso, pode configurar lembretes em qualquer um dos padrões detetados.

Semanalmente, todas as segundas-feiras, recebe um resumo dos padrões. Também pode decidir se deseja receber uma notificação quando o resumo estiver disponível.

A partir do separador Atual no ecrã Padrões de glicose

- Visualize todos os padrões detetados nas últimas 2 semanas (desde a segunda-feira da semana anterior até à data/hora atual). Também pode ver que quais são os padrões que têm lembretes definidos.
- Tocar num padrão detetado para obter mais informações, incluindo quaisquer entradas associadas a hidratos de carbono, insulina e resultados de glicemia no diário da aplicação Accu-Chek SmartGuide. Toque num dia do padrão para visualizar os detalhes e as informações do diário para esse dia.
- Configurar a notificação do resumo da última semana.

A partir do separador Anterior no ecrã Padrões de glicose

- Visualizar os padrões que já não são detetados, ordenados a partir do mês mais recente. Os padrões anteriores, com mais de 2 semanas, são armazenados separadamente, até um máximo de 6 meses.

Para mais informações sobre padrões, consulte o capítulo Padrões de glicose.

Notificações personalizáveis

Configure as notificações das probabilidades de ter glicose baixa noturna e do resumo de padrões semanal. Por predefinição, a notificação de glicose baixa nos 30 minutos seguintes está ativada. A funcionalidade de notificações personalizáveis permite satisfazer as suas necessidades e preferências pessoais.

A partir do **Menu**, pode aceder a **Definições de notificação**. Se tiver algum problema, pode ainda verificar as definições de funcionamento do seu dispositivo móvel. As notificações têm de estar ativadas.

Exportar relatório

Selecione o período de duas semanas de dados a exportar para os seus padrões e/ou o relatório do seu perfil de glicose em ambulatorio (AGP). A análise do relatório permite-lhe compreender melhor o seu estado glicémico geral no passado. Estas informações do histórico de glicose ajudam-no a gerir melhor os seus níveis de glicose no futuro. Além disso, é fácil partilhar o relatório com o seu profissional de saúde.

Para mais informações sobre como gerar este relatório, consulte o capítulo Exportar relatório.

Ecrã inicial

Visualize todas as suas informações num relance. Todos os dados relevantes, como os anteriores valores de glicose, o último valor de glicose e a predição da glicose são apresentados num gráfico.

Os seus cartões de Predição de glicose baixa noturna, Predição de glicose baixa e os padrões detetados nas últimas 24 horas são apresentados por baixo do gráfico, no ecrã inicial. Tenha em atenção que a notificação *Glicose baixa em breve!* apenas aparece se houver um risco alto de ter glicose baixa. A notificação *Glicose baixa em breve!* aparecerá inicialmente no ecrã de bloqueio. Por predefinição, esta notificação já está ativada quando abre a aplicação pela primeira vez.

Para mais informações sobre este ecrã e sobre os elementos de navegação da aplicação, consulte o capítulo Ecrã inicial.

Transferência de dados

A aplicação Predict transfere todos os seus dados de diabetes armazenados na aplicação para a sua conta Accu-Chek. Requer uma ligação à Internet.

Integração plena com a aplicação Accu-Chek SmartGuide

Uma vez que as aplicações Accu-Chek SmartGuide e Predict partilham os seus dados de diabetes, pode passar diretamente para a aplicação Accu-Chek SmartGuide a partir desta aplicação. Toque no ícone da aplicação Accu-Chek SmartGuide existente no canto superior direito do ecrã Inicial. Também pode tocar no ícone da aplicação Predict no ecrã Inicial da aplicação Accu-Chek SmartGuide para voltar à aplicação Predict.

Para mais informações sobre como isto funciona, consulte Configuração da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

 **PRECAUÇÃO****Risco de lesão grave**

Aconselhamos a não alterar a sua terapia geral, como os rácios de hidratos de carbono, o programa de insulina ou a intensidade do exercício, com base nos dados apresentados, sem consultar primeiro o seu profissional de saúde. Em caso de questões sobre a terapia de rotina, contacte o profissional de saúde.

No caso de valores de glicose inesperados, antes de discutir as alterações à terapia com o profissional de saúde, recomendamos o seguinte:

- Compare os valores de glicose apresentados nesta aplicação com os valores de glicose originais, fornecidos pela aplicação Accu-Chek SmartGuide.
- Se as dúvidas persistirem, realize um teste de glicemia com o seu aparelho de medição da glicemia.
- Se, ainda assim, não tiver a certeza sobre os níveis de glicose indicados nas aplicações, contacte o profissional de saúde.

A aplicação Predict faz predições com base nos dados de MCG e nas entradas registadas (hidratos de carbono e insulina). Quaisquer medidas que possa tomar nas duas horas seguintes (tais como comer, tomar insulina e fazer exercício) não são tomadas em consideração na predição. Tenha em atenção que para a Predição de glicose baixa noturna são mais de 2 horas, uma vez que abrange a noite.

4.1 Pré-requisitos para utilizar a aplicação

Contas necessárias

- É necessário um Apple ID para transferir a aplicação para dispositivos iOS.
- É necessária uma conta Google para transferir a aplicação para dispositivos Android.
- É necessária uma conta Accu-Chek para configurar a aplicação.
- É necessário um endereço de e-mail para criar uma conta Accu-Chek.

Requisitos do sistema

A aplicação só pode ser utilizada caso se verifiquem os seguintes requisitos:

- Tem de utilizar a aplicação e o sensor de MCG Accu-Chek SmartGuide.
- Tem de ter uma ligação à Internet para receber as predições de glicose e as notificações da aplicação.
- A versão iOS da aplicação necessita do iOS 15.3 ou superior.
- A versão Android da aplicação necessita do Android 11 ou superior.

Antes de fazer a atualização do dispositivo móvel para uma versão mais recente do sistema operativo, certifique-se de que a aplicação é compatível com a nova versão do sistema operativo. Em caso de dúvida, verifique a lista de dispositivos compatíveis em <https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>. Mesmo assim, se precisar de ajuda, contacte a assistência a clientes.

Recomenda-se que atualize a sua aplicação e/ou o sistema operativo do dispositivo móvel assim que estiver disponível uma atualização.

Requisitos de rede

A aplicação necessita das seguintes permissões:

- Ligação à internet segura para partilha de dados com a sua conta Accu-Chek e a nuvem da Roche Diabetes Care. Ligue o seu dispositivo móvel apenas a redes móveis e a uma Wi-Fi® conhecida, segura e de confiança.

Requisitos do browser (navegador da Internet)

Necessita de um browser para criar uma conta Accu-Chek e iniciar sessão na aplicação. Caso ainda não tenha um browser instalado, terá de o transferir primeiro.

Esta aplicação é compatível com os seguintes browsers em dispositivos Android:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Mozilla Firefox Focus
- Microsoft Edge
- Samsung Internet

Esta aplicação é compatível com o browser Safari em dispositivos iOS.

4.2 Notas da versão

Aceda à App Store ou ao Google Play para obter as notas da versão da aplicação mais recentes.

5.1 Instalar e desinstalar a aplicação

Instalar a aplicação

Em primeiro lugar, terá de transferir a aplicação para o seu dispositivo móvel. Pode transferir a aplicação a partir das seguintes plataformas de distribuição digitais:

- App Store para os utilizadores de iOS
- Google Play para os utilizadores de Android

Transfira e instale a aplicação no seu dispositivo móvel. Poderá encontrar informações sobre como instalar aplicações no seu dispositivo móvel no manual de utilização do seu dispositivo móvel, assim como na App Store ou no Google Play.

Desinstalar a aplicação

Poderá encontrar informações sobre como desinstalar aplicações do seu dispositivo móvel no manual de utilização do seu dispositivo móvel, assim como na App Store ou no Google Play.

5.2 Iniciar sessão na aplicação Predict

Assim que a transferência e a instalação da aplicação tenham sido efetuados, poderá abri-la e iniciar sessão na mesma.

Necessita de um browser para iniciar a sessão na aplicação. Caso ainda não tenha um browser instalado, terá de o transferir primeiro.

- 1** Toque no ícone da aplicação.
- 2** Aparecem os ecrãs de introdução. Deslize para a esquerda para ver os ecrãs.
- 3** Inicie sessão na aplicação com o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Accu-Chek.
- 4** Não tem uma conta Accu-Chek? Toque em **Criar uma conta** e siga as instruções no ecrã.

5.3 Configuração da aplicação Accu-Chek SmartGuide

Se a aplicação Accu-Chek SmartGuide estiver configurada, a aplicação Predict recebe os dados de MCG automaticamente.

Se a transferência de dados for bem-sucedida, aparece o ecrã inicial. Aceda às áreas da aplicação a partir da navegação inferior.

A aplicação Accu-Chek SmartGuide não está instalada?

Toque em **Vá até à aplicação** e será redirecionado para a sua app store. Também pode tocar no ícone da aplicação Accu-Chek SmartGuide, no canto superior direito do ecrã inicial.

O seu sensor ainda não está emparelhado?

- Toque em **Vá até à aplicação** e a aplicação Accu-Chek SmartGuide abre-se. Siga as instruções para emparelhar o seu sensor.
- A aplicação Predict necessita de valores de glicose atualizados regularmente para fornecer uma predição o mais precisa possível. Toque em **Sincronizar agora** para transferir os seus dados de MCG.

A aplicação está instalada e ligada, mas alguma coisa correu mal?

- Tem de ter a sessão iniciada na sua conta Accu-Chek.
Se concluir a sessão, não receberá valores de glicose ou notificações. Utilize as credenciais de início de sessão da conta Accu-Chek para aceder tanto à aplicação Accu-Chek SmartGuide como à aplicação Predict.
- Não existem dados suficientes.
Certifique-se de que o sensor de MCG e a aplicação Accu-Chek SmartGuide estão a funcionar corretamente. É necessário transferir, no mínimo, 1 hora ininterrupta de dados de MCG para a aplicação Predict Ihe poder fornecer uma primeira predição de glicose para as 2 horas seguintes.
- Chegou a altura de substituir o sensor.
Volte à aplicação Accu-Chek SmartGuide e siga as instruções para substituir o sensor.
- Dados de MCG não disponíveis.
Não são apresentados dados no gráfico do ecrã inicial. Volte à aplicação Accu-Chek SmartGuide para resolver os problemas. Toque no ícone da aplicação Accu-Chek SmartGuide no canto superior direito do ecrã inicial.

6.1 Requisitos gerais

Cuidados a ter com o dispositivo

Não utilize a aplicação num dispositivo móvel com um visor rachado ou danificado. Se o visor estiver rachado ou danificado, poderá não ser possível ver tudo o que é apresentado no visor. Utilize a aplicação apenas num dispositivo móvel que funcione devidamente.

6.2 Proteção do acesso

Proteção de dados

Proteja os dados da aplicação de acesso desconhecido ou de uso indevido. Utilize as funções de segurança disponíveis no seu dispositivo móvel ou no sistema operativo, por exemplo, a proteção por palavras passe.

Todos os seus dados de diabetes estão também encriptados e protegidos na sua conta Accu-Chek, na nuvem da Roche Diabetes Care.

Para informações sobre como a Roche recolhe e utiliza os seus dados pessoais:

- Toque em **Menu > Conta > Definições de privacidade**
- Toque em **Menu > Conta > Gerir conta**

Proteção do dispositivo móvel

Proteja a aplicação do acesso por terceiros. Permita o acesso apenas a cuidadores de confiança.

- Não empreste o dispositivo móvel a outras pessoas, incluindo crianças.
- Defina um bloqueio do ecrã nas definições de segurança do dispositivo móvel.
- Configure o bloqueio do ecrã para bloquear automaticamente o dispositivo móvel após um determinado período de inatividade.

Proteção da conta

Mantenha as informações da sua conta Accu-Chek privadas. Não partilhe a sua conta com ninguém, a não ser com os seus cuidadores.

Proteja o dispositivo móvel de alterações ao software. Assegure-se de que é necessária uma palavra-passe para instalações efetuadas a partir da app store (por exemplo, App Store ou Google Play).

Para informações sobre a alteração da palavra-passe da conta Apple ou Google, consulte as instruções da plataforma de transferência.

Para alterar as definições da palavra-passe da sua conta Accu-Chek, vá até **Menu > Conta > Gerir conta**.

Para mais informações sobre como configurar o seu dispositivo móvel, consulte o capítulo Configurar o dispositivo móvel no manual de utilização da aplicação Accu-Chek SmartGuide.



O ecrã inicial é o centro da aplicação e está dividido em 5 secções. Este ecrã predefinido apresenta o seguinte:


- 1 Ícone da aplicação Accu-Chek SmartGuide: Toque neste ícone para ir para o ecrã inicial da aplicação Accu-Chek SmartGuide. A sua aplicação Predict permanece aberta.
- 2 Toque no ícone ⓘ para saber mais sobre como o gráfico apresenta a sua predição de glicose.
- 3 O gráfico indica os níveis de glicose durante a hora anterior, o seu valor atual e o intervalo previsto para as 2 horas seguintes. A linha a ponteados no intervalo previsto representa uma projeção do valor de glicose média. A precisão do intervalo de glicose previsto diminui com o tempo, conforme indicado pelas barras verticais expandidas. As mensagens de erro de predição são apresentadas na área do gráfico.
- 4 Nível de glicose atual na unidade de medida correspondente.
- 5 Área de mensagens: As informações importantes, como a probabilidade de ter glicose baixa noturna e glicose baixa nos 30 seguintes, são apresentadas aqui, logo abaixo do gráfico. Se a aplicação detetar padrões nos seus níveis de glicose, apresenta-os aqui.

7.1 Elementos de navegação

Na parte superior do ecrã são apresentados os seguintes elementos de navegação.

- Toque em < para voltar ao ecrã anterior.
- Toque em ✕ para fechar um ecrã.

Na parte inferior do ecrã são apresentados os seguintes elementos de navegação.

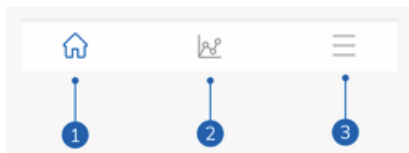

Os ícones são destacados a azul para indicar a área da aplicação que está a ser visualizada pelo utilizador.

- 1 Ícone **Início**: Toque para aceder ao ecrã Inicial.
- 2 Ícone **Padrões**: Toque para aceder ao ecrã Padrões de glicose.
- 3 Ícone **Menu**: Toque para apresentar mais opções do menu. As opções incluem Ligações, Conta, Definições de notificação, Exportar relatório, Manual de utilização, Informações sobre o produto e Contacte-nos.

A aplicação prevê os níveis de glicose que poderá ter nas 2 horas seguintes. Esta predição baseia-se nos seus valores anteriores de MCG, assim como nas entradas de hidratos de carbono e de insulina registadas no diário da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

A predição de glicose é apresentada no gráfico do ecrã inicial se tiver sido transferida com êxito para a aplicação, pelo menos, 1 hora ininterrupta de dados de MCG.

O gráfico indica os níveis de glicose durante a hora anterior, o seu valor atual e o intervalo previsto para as 2 horas seguintes. A linha a ponteados no intervalo previsto representa uma projeção do valor de glicose média.

A precisão do intervalo de glicose previsto diminui com o tempo, conforme indicado pelas barras verticais expandidas.

Lembre-se de que os valores futuros de glicose apresentados são predições que podem diferir dos valores reais e que não são afetados pelo estado atual do Modo de tendência ou do Modo de terapia na aplicação Accu-Chek SmartGuide. O modo de tendência indica que os valores apresentados na aplicação Accu-Chek SmartGuide só devem ser utilizados para visualizar tendências e como referência geral. Apenas os valores apresentados no modo de terapia podem ser utilizados para tomar decisões terapêuticas.

O intervalo indicado no gráfico vai de 0 a 300 mg/dL (0–16,7 mmol/L). Se o seu valor estiver acima de 300 mg/dL (16,7 mmol/L), será identificado por um triângulo com o vértice para cima. Se o seu valor estiver acima de 400 mg/dL (22 mmol/L) a aplicação apresentará a indicação HI, em vez de um valor numérico. Se o seu valor for baixo, inferior a 40 mg/dL (2,2 mmol/L), será identificado por um triângulo com o vértice para baixo e a aplicação apresentará a indicação LO, em vez de um valor numérico.

Se a glicemia prevista tender para um valor baixo e se o cartão Predição de glicose baixa for apresentado, só serão apresentados no gráfico os valores de glicose até aos 30 minutos seguintes. Se a glicemia prevista não atingir um valor baixo nos 30 minutos seguintes, não serão apresentados quaisquer valores de predição no gráfico, só e apresentado o cartão de Predição de glicose baixa.

Tenha em consideração o seguinte quando visualizar a sua predição:

- A aplicação Predict faz predições com base nos dados de MCG e nos registos de hidratos de carbono e insulina. Quaisquer medidas que possa tomar nas duas horas seguintes (tais como comer, tomar insulina e fazer exercício) não são tomadas em consideração na predição.
- A predição de 2 horas é apenas informativa quando efetuada para períodos superiores a 45 minutos e se destina a chamar a atenção do utilizador para eventuais medidas a tomar (tais como verificar a glicose mais frequentemente, preparar injeções de insulina ou ter hidratos de carbono prontamente disponíveis). Nos casos de predições de glicose alta ou baixa para os 45 minutos seguintes, deverá considerar eventuais medidas a tomar.

8.1 Mensagens de erro de predição de glicose

Quando não há nenhuma predição de glicose no ecrã inicial, aparece uma das seguintes mensagens de erro.

Mensagem de erro	Ação
Para prever a sua glicose é necessária, pelo menos, 1 h de dados de MCG.	Aguarde 1 hora para obter uma predição da sua glicose.

Mensagem de erro	Ação
Não é possível prever a sua glicose enquanto os seus valores estiverem abaixo de 70 mg/dL (3,9 mmol/L) .	Não podemos fornecer uma predição enquanto o seu nível de glicose estiver baixo. Para aumentar o nível de glicose para valores acima de 70 mg/dL (3,9 mmol/L), coma ou beba alguma coisa açucarada conforme recomendado pelo seu profissional de saúde. (Este valor é apenas um exemplo. O seu limite de glicose baixa poderá ser diferente.)
Não é possível prever a sua glicose. Tente novamente mais tarde.	Não foi possível prever a sua glicose. Tente mais tarde. Se continuar a receber este erro, contacte a assistência a clientes.

8.2 Predição de glicose baixa

O cartão Predição de glicose baixa é apresentado no ecrã inicial, quando a aplicação prevê níveis baixos de glicose para os 30 minutos seguintes. A glicose baixa poderá ocorrer em qualquer altura nos 30 minutos seguintes.

Ter glicose baixa significa que o seu valor de glicose poderá ficar abaixo do Limite de glicose baixa que definiu para os seus alarmes de glicose na aplicação Accu-Chek SmartGuide. Para mais informações sobre como definir os seus limites de glicose, consulte o capítulo Começar do manual de utilização da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

Se houver uma probabilidade alta de ter glicose baixa nos 30 minutos seguintes e as notificações estiverem ativadas, a notificação *Glicose baixa em breve!* aparece no seu ecrã de bloqueio ou quando passa o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã, consoante o que tiver configurado no seu dispositivo móvel.

Toque na notificação *Glicose baixa em breve!* para receber informações adicionais sobre o ecrã Predição de glicose baixa. Leia as recomendações e decida que medida tomar a seguir.

8.3 Exceções da Predição de glicose baixa

A funcionalidade Predição de glicose baixa está ativa 24 horas por dia e 7 dias por semana, com as seguintes exceções:

- O seu alarme de glicose baixa está definido abaixo de 60 mg/dL (3,3 mmol/L) ou acima de 100 mg/dL (5,5 mmol/L) na aplicação Accu-Chek SmartGuide. Esta notificação não funciona se o seu alarme de glicose baixa for definido acima de 100 mg/dL (5,5 mmol/L).
- Se passarem 20 minutos desde a sua última ingestão de hidratos de carbono
- Se passarem 30 minutos desde que a última predição e a última notificação tiver sido enviada
- Se o seu valor de glicose já estiver abaixo do Limite de glicose baixa que definiu para os seus alarmes de glicose na aplicação Accu-Chek SmartGuide. Para mais informações sobre como definir os seus limites de glicose, consulte o capítulo Começar do manual de utilização da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

O cartão de Predição de glicose baixa apresentado no ecrã inicial desaparece passados 15 minutos.

A funcionalidade Predição de glicose baixa noturna informa-o, antes de se deitar, da probabilidade de ter glicose baixa durante a noite e também do período em que o risco de valores baixos é mais provável. A predição está disponível entre as 21:00 h e as 02:00 h.

Ter glicose baixa significa que o valor de glicose poderá descer abaixo dos 70 mg/dL (3,9 mmol/L). A funcionalidade Predição de glicose baixa noturna funciona com um limite inferior fixo de 70 mg/dL (3,9 mmol/L), que é independente da aplicação Accu-Chek SmartGuide.

Uma noite define-se como sendo um período de 7 horas que começa a partir da hora a que a predição de glicose é calculada.


É possível definir a funcionalidade Predição de glicose baixa noturna e, quando pretender, obter um novo cálculo da aplicação, para qualquer período entre as 21:00 h e as 02:00 h. Também pode programar a notificação de risco elevado (significativamente acima do risco normal) para períodos diferentes.

Se houver alta probabilidade de ter glicose baixa durante a noite e as notificações estiverem ativadas, a notificação *Predição de glicose baixa noturna!* aparecerá no ecrã de bloqueio do seu dispositivo móvel. O cartão de Predição de glicose baixa noturna também pode ser visualizado por baixo do gráfico, no ecrã inicial desta aplicação. Vá até **Menu > Definições de notificação** para gerir esta notificação.

Toque na notificação ou no cartão para visualizar a predição gráfica no ecrã Predição de glicose baixa noturna.

A probabilidade de ter glicose baixa durante a noite divide-se em 3 níveis de risco diferentes, com uma cor diferente a representar cada nível:

- Normal – menos de 30 % (verde)
- Elevado – entre 30 % e 60 % (amarelo)
- Muito elevado – acima de 60 % (vermelho)

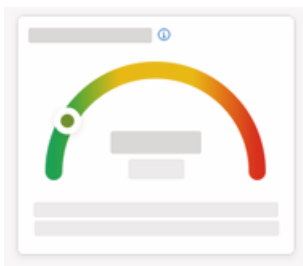

Independentemente de a probabilidade de ter glicose baixa durante a noite ser normal, elevada ou muito elevada, considere eventuais medidas a tomar.

Um risco normal não deixa de ser um risco, pelo que, neste caso, também devem ser consideradas eventuais medidas a tomar.

No caso de existir uma probabilidade elevada ou muito elevada de glicose baixa noturna, o ecrã Predição de glicose baixa noturna também apresenta as seguintes recomendações:

- Mantenha pequenas porções de alimentos de hidratos de carbono ao seu alcance junto à sua cama.
- Considere injetar menos unidades de insulina basal à noite.
- Coma alimentos ricos em proteínas ou gorduras.

Pode obter um cálculo da probabilidade de ter glicose baixa a cada 20 minutos, desde que tenham decorrido 20 minutos depois da última refeição e/ou injeção de insulina, com as seguintes exceções:

- Se o seu valor de glicose for inferior a 70 mg/dL (3,9 mmol/L) ou inferior ao seu Limite de glicose baixa (se for superior a 70 mg/dL (3,9 mmol/L)).
- Se a predição de glicose ou o cartão Predição de glicose baixa indicar que está prestes a ficar abaixo dos 70 mg/dL (3,9 mmol/L). O seu valor de glicose poderá diferir do valor de glicose indicado aqui, uma vez que este valor se baseia no limite de glicose baixa que definiu para os seus alarmes de glicose na aplicação Accu-Chek SmartGuide.

9.1 Mensagens de erro de Predição de glicose baixa noturna

Quando não for possível fornecer a sua predição de glicose baixa noturna, leia a seguinte tabela para compreender melhor porquê, e as eventuais medidas a tomar. Os seus valores de glicose poderão ser diferentes dos apresentados aqui.

Mensagem de erro	Ação
Alguma coisa correu mal	O nosso serviço poderá não estar disponível. Se Tentar novamente não funcionar, aguarde alguns minutos. Se continuar a receber este erro, contacte a assistência a clientes.
Ainda não está disponível	Ainda é demasiado cedo para calcular se pode ter glicose baixa à noite. Terá de voltar a verificar entre as 21:00 h e as 02:00 h. A funcionalidade Predição de glicose baixa noturna só funciona durante este período.
Dados insuficientes	Certifique-se de que usa o sensor de MCG durante pelo menos 1 dia. Precisamos de pelo menos 1 dia de dados para prever a sua probabilidade de ter glicose baixa durante a noite.
Ingestão de hidratos de carbono ou insulina detetada	Se tiverem sido registadas entradas de hidratos de carbono ou de insulina no diário da aplicação Accu-Chek SmartGuide, esta aplicação necessita de, pelo menos, 20 minutos para analisar as novas entradas e recalcular a probabilidade de ter glicose baixa durante a noite.
Glicose baixa iminente	Esta mensagem aparece se a sua predição de glicose ou cartão de Predição de glicose baixa indicar um valor de glicose abaixo de 70 mg/dL (3,9 mmol/L). (Este valor é apenas um exemplo. O seu limite de glicose baixa poderá ser diferente.)
Está abaixo dos 70 mg/dL (3,9 mmol/L)	Esta aplicação não pode prever glicose baixa quando o nível de glicose já está baixo. Coma ou beba algo açucarado conforme recomendado pelo seu profissional de saúde. (Este valor é apenas um exemplo. O seu limite de glicose baixa poderá ser diferente.)

Mensagem de erro	Ação
Alguma coisa correu mal	Não pudemos prever a sua glicose quando tentou calcular o seu risco. Tente mais tarde.
Está online?	Para utilizar esta aplicação, certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à Internet.

9.2 Ativar a Predição de glicose baixa noturna

- 1** No cartão de Predição de glicose baixa noturna, toque em **Ativar**.
 - 2** Toque em **Seguinte** e ative o comutador de notificação.
 - 3** Introduza a hora e toque em **Concluído**.
Selecione uma hora que seja pelo menos 30 minutos depois da sua última refeição e administração de insulina do dia e antes de se deitar.
- Aparece o ecrã de confirmação. Toque em **OK**.

Esta funcionalidade identifica eventos glicêmicos recorrentes que ocorrem durante um dia ou uma semana (de segunda-feira a domingo).

Todos os dias, os padrões detetados nas últimas 24 horas são indicados por baixo do gráfico, no ecrã Inicial.

Ambos os padrões dentro e fora do intervalo são visualizados. A visualização dos seus padrões fora do intervalo permite-lhe tomar medidas práticas para os prevenir no futuro.

Os padrões são apresentados por ordem decrescente, começando nos que apresentam maior risco para a saúde, como os padrões muito baixos ou baixos. Também pode configurar lembretes em qualquer um dos padrões detetados.

Todas as segundas-feiras, a aplicação apresenta um resumo dos padrões detetados na semana anterior. Para ser notificado quando este resumo está disponível, consulte Ativar a notificação para o Resumo da semana.

Toque no ícone Padrões, na navegação inferior, para fazer o seguinte:

A partir do separador Atual no ecrã Padrões de glicose

- Visualizar os padrões detetados e os padrões para os quais foram configurados lembretes.
- Tocar num padrão detetado para obter mais informações, incluindo quaisquer entradas associadas a hidratos de carbono, insulina e resultados de glicemia no diário da aplicação Accu-Chek SmartGuide. Toque num dia do padrão para visualizar os detalhes e as informações do diário para esse dia.
- Configurar a notificação do resumo da última semana.

A partir do separador Anterior no ecrã Padrões de glicose

- Visualizar os padrões que já não são detetados, ordenados a partir do mês mais recente. Os padrões anteriores, com mais de 2 semanas, são armazenados separadamente, até um máximo de 6 meses.

A primeira vez que visualiza o ecrã Padrões de glicose, é apresentada uma panorâmica geral. Leia os ecrãs para compreender melhor esta funcionalidade.

10.1 Tipos de padrões de glicose

As tabelas deste capítulo apresentam os padrões possíveis e os respetivos blocos de tempo, que podem ser detetados a partir dos seus dados de MCG.

A primeira tabela apresenta os blocos de tempo e as respetivas horas de início e de fim.











Bloco de tempo	Hora de início	Hora de fim	Fuso horário
De noite	00:00	06:00	Hora local
Manhã	06:00	10:00	Hora local
Durante o dia	10:00	20:00	Hora local
Fim do dia	20:00	00:00	Hora local
Dia inteiro	00:00	00:00	Hora local

A data/hora de um padrão refere-se à hora local na altura em que é registada. As datas/horas anteriores não são atualizadas no caso de viajar para um fuso horário diferente.

A tabela que se segue apresenta uma lista de possíveis padrões que esta aplicação poderá detetar a partir dos dados do utilizador.

São utilizados aqui valores de glicose predefinidos e fixos desta aplicação, como valores limites que dão origem a um padrão fora do intervalo. Os padrões dentro do intervalo e fora do intervalo pós-prandial são desencadeados pelo intervalo-alvo que definiu na aplicação Accu-Chek SmartGuide.

Para poder beneficiar da detecção de um padrão desta aplicação associado a um pequeno-almoço ou uma refeição, tem de registar as suas refeições continuamente na aplicação Accu-Chek SmartGuide.



Ícone do padrão	Padrões possíveis	Descrição
	Baixo (manhã, durante o dia, fim do dia, noite)	Glicose abaixo de 70 mg/dL (3,9 mmol/L)
	Glicose muito baixa (manhã, durante o dia, fim do dia, noite)	Glicose abaixo de 54 mg/dL (3,0 mmol/L)
	Glicose baixa prolongada (manhã, durante o dia, fim do dia, noite)	Glicose abaixo de 70 mg/dL (3,9 mmol/L) durante mais de 2 horas
	Glicose baixa várias vezes por dia	Glicose abaixo de 70 mg/dL (3,9 mmol/L) várias vezes no mesmo dia
	Glicose muita alta (manhã, durante o dia, fim do dia, noite)	Glicose acima de 250 mg/dL (13,9 mmol/L)
	Glicose alta antes do pequeno-almoço	Glicose acima de 130 mg/dL (7,2 mmol/L) Este valor é apenas um exemplo. O seu valor de glicose depende do Valor-alvo inferior que definiu na aplicação Accu-Chek SmartGuide. Intervalo de tempo: 06:00–10:00
	Alto (manhã, durante o dia, fim do dia, noite)	Glicose acima de 180 mg/dL (10,0 mmol/L)
	Fora do intervalo pós-prandial	Glicose fora do seu intervalo-alvo depois de comer
	Dentro do intervalo antes do pequeno-almoço	Glicose dentro do seu intervalo-alvo antes de comer Intervalo de tempo: 06:00–10:00
	Dentro do intervalo	Glicose dentro do seu intervalo-alvo

Ícone do padrão	Padrões possíveis	Descrição
	Dias consecutivos dentro do intervalo	Glicose dentro do intervalo em 3 ou mais dias consecutivos
	Pós-prandial dentro do intervalo	Glicose dentro do seu intervalo-alvo depois de comer
	Variabilidade de MCG elevada	Níveis de glicose flutuam ao longo do dia.
	Correção excessiva de glicose baixa	Glicose oscila entre valores inferiores a 70 mg/dL (3,9 mmol/L) e valores superiores a 250 mg/dL (13,9 mmol/L) num período de 3 horas.
	Correção excessiva de glicose alta	Glicose oscila entre valores superiores a 250 mg/dL (13,9 mmol/L) e valores inferiores a 70 mg/dL (3,9 mmol/L) num período de 3 horas.

10.2 Possíveis causas dos padrões de glicose baixos e altos

A tabela que se segue inclui possíveis causas de padrões baixos e altos para uma pessoa com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Tenha em atenção que poderão não ser apresentadas as causas para todos os padrões e tipos de diabetes. Na aplicação, toque em cada causa para obter mais informações.

Ícone	Causa
	Dosagem de insulina
	Locais de injeção
	Comida e bebida
	Atividade física
	Influências hormonais
	Hormonas e biorritmos

Ícone	Causa
	Calor
	Stress, sono e doença

10.3 Definir um lembrete de padrão de glicose

Definir um lembrete de padrão permite-lhe definir a medida que pretende tomar.

Ao utilizar os dados obtidos pela aplicação e o conhecimento que tem do seu próprio estilo de vida e comportamentos, poderá obter um melhor equilíbrio glicémico e evitar situações críticas.

Em qualquer altura, pode selecionar um padrão individual e desativar o lembrete.

Uma vez resolvido um padrão, a aplicação passa automaticamente para o separador Anterior. Ao mesmo tempo, se existir um lembrete definido para esse padrão, a aplicação remove o lembrete.

- 1** Na navegação inferior, toque em **Padrões**.
- 2** Toque no padrão para o qual pretende criar um lembrete.
- 3** Toque em **Configurar lembrete**.
- 4** Ative o seletor de lembrete.
- 5** Selecione o dia, a hora e a frequência com que pretende receber um lembrete de padrão. Toque em **Guardar**.
- 6** Toque em **Concluído**.
- Aparece o ecrã de confirmação. Toque em **Ok**.
Repita os mesmos passos para cada padrão a que pretende associar um lembrete.

10.4 Adicionar uma nota

Só pode adicionar uma nota nos dias em que ocorrem padrões. A nota também aparece no relatório de padrões.

- 1** Na navegação inferior, toque em **Padrões**.
- 2** Toque no padrão a que pretende adicionar uma nota.
- 3** Toque no dia em que ocorreu o padrão.
- 4** Toque em **Adicionar** e introduza uma breve descrição.

10.5 Ativar a notificação para o Resumo da semana

Todas as segundas-feiras é gerado o resumo de padrões da semana anterior. Para ser notificado quando este resumo está disponível:

- 1** Na navegação inferior, toque em **Padrões**.
- 2** No cartão Resumo da semana, toque em **Ativar**.
- 3** Ative o seletor de notificação.

10 Padrões de glicose

- 4** Toque em **Seguinte**.
- 5** Toque em **Notificar-me diariamente às** para editar a hora a que deseja receber a notificação.
- 6** Toque em **Seguinte**.
- Aparece o ecrã de confirmação. Toque em **Ok**.

Pode modificar as suas selecções a partir de **Menu > Definições de notificação**.


Quando exportar um relatório pela primeira vez, familiarize-se com a panorâmica geral desta funcionalidade, disponível no ecrã. Toque no ícone ⓘ para voltar à panorâmica geral em qualquer altura.

Pode exportar o relatório diretamente a partir desta aplicação. Tem a flexibilidade de incluir o seu Perfil ambulatório de glicose (AGP) e/ou os padrões de um período de duas semanas. Partilhar o seu relatório PDF com o seu profissional de saúde é fácil. Certifique-se de que o método que está a ser utilizado para partilhar os seus dados, como o e-mail, tem proteções instaladas para manter os seus dados seguros.

Exportação do relatório

- 1** Toque em **Menu > Exportar relatório**.
 - 2** Selecione o período de duas semanas do relatório.
 - 3** Selecione o conteúdo do relatório.
 - 4** Toque em **Gerar relatório**.
- ✓ O seu relatório é apresentado.
Pode partilhar o relatório ou guardá-lo para o analisar posteriormente. Se fechar o relatório gerado antes de o guardar, volte a gerá-lo e, em seguida, guarde-o numa localização da sua preferência.

Para visualizar as definições da aplicação e efetuar alterações, toque em **Menu**, na navegação inferior. Examine regularmente as definições e outros detalhes. As informações mais atualizadas fornecerão a melhor experiência na utilização desta aplicação.

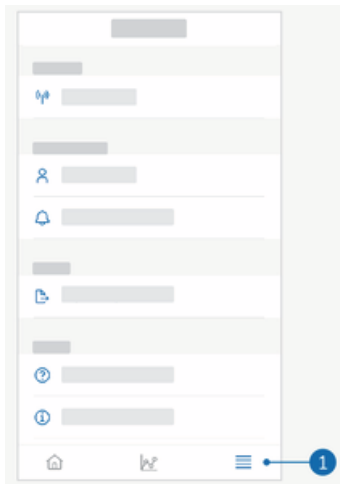

Editar as Definições de notificação

- 1 Toque em **Menu > Definições de notificação**.
- 2 Ative ou desative o seletor de notificação, conforme for necessário.
- 3 Se ativar a notificação para o resumo de padrões semanal, ajuste a hora, se for aplicável.
- 4 Toque em **Guardar**.

Editar detalhes da conta

- 1 Toque em **Menu > Conta > Gerir conta**.
- 2 Adicione ou atualize as informações necessárias. Toque em **Guardar**.

Definições de privacidade

- 1 Toque em **Menu > Conta > Definições de privacidade**.

Ecrã Informações sobre o produto

- 1 Toque em **Menu > Informações sobre o produto**.

Terminar a sessão

- 1 Toque em **Menu > Conta > Terminar a sessão**.

Eliminar conta

- 1 Toque em **Menu > Conta > Eliminar a minha conta**.
Certifique-se de que pretende mesmo prosseguir com esta ação. Se eliminar a sua conta Accu-Chek, vai perder todos os dados. Os seus dados não poderão ser recuperados numa altura posterior.
- 2 Toque em **Concluído**.


13.1 Resolução de problemas

Clique nos links que se seguem, para obter mais informações.

- Mensagens de erro de predição de glicose
- Exceções da Predição de glicose baixa
- Mensagens de erro de Predição de glicose baixa noturna
- Possíveis causas dos padrões de glicose baixos e altos

13.2 Visão geral das notificações

A aplicação comunica consigo de maneiras diferentes.

Algumas notificações são apenas informativas. Leia a notificação e toque em  para a fechar.

Outras notificações indicam eventuais medidas que pode tomar. Leia a notificação e selecione a ação pretendida.

Enquanto utiliza a aplicação poderá encontrar os seguintes tipos de notificações informativas:

- Ajuda com as tarefas de integração
- Informações sobre o seu nível de glicose atual
- Informações sobre a sua predição de glicose
- Informações sobre a sua glicose baixa e glicose alta
- Informações sobre diferentes tipos de problemas com a aplicação ou com o seu dispositivo móvel, a título de exemplo

Contacte-nos

Em caso de problemas, se existirem questões sobre o funcionamento da aplicação ou se forem necessárias mais informações sobre a aplicação, contacte a assistência a clientes. Toque em **Menu > Contacte-nos**.

Reporte de incidentes graves

Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e em países com regulamentação idêntica; se durante ou em resultado da utilização deste dispositivo, ocorrer um incidente grave, agradecemos que o comunique ao fabricante e às autoridades do seu país.

Manual de utilização impresso

Caso pretenda uma versão impressa deste manual de utilização, contacte a assistência a clientes. A versão impressa é grátis e será enviada passados alguns dias.

Transferir o manual de utilização

Este manual de utilização está disponível para transferência a partir de <https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>.*

* a transferência pode implicar a utilização de dados/encargos

Nome do produto

Aplicação Accu-Chek SmartGuide Predict

Tipo de aplicação

Aplicação para dispositivos móveis

Versão da aplicação

3.7

Para mais informações sobre a versão da aplicação que está a ser utilizada, toque em **Menu > Informações sobre o produto**.

Sistemas operativos suportados

A aplicação só está disponível para sistemas operativos específicos. Utilize a aplicação apenas se esta suportar o sistema operativo.

Para informações mais recentes sobre os sistemas operativos compatíveis e as respetivas versões, toque em

<https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>.

Dispositivos móveis suportados

Só é possível transferir a aplicação se o dispositivo móvel suportar a versão iOS ou Android necessária ao seu funcionamento.













Para obter as informações mais recentes sobre dispositivos móveis compatíveis, toque em **<https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>**.









Browsers suportados

Necessita de um browser para criar uma conta Accu-Chek e iniciar sessão na aplicação. Caso ainda não tenha um browser instalado, terá de o transferir primeiro.

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Mozilla Firefox Focus
- Microsoft Edge
- Samsung Internet

Esta aplicação é compatível com o browser Safari em dispositivos iOS.

Símbolo	Descrição
Navegação na aplicação	
	Início
	Padrões
	Menu
Navegação no ecrã	
	Voltar
	Fechar
	Marca de verificação
	Informações adicionais
Menu da aplicação	
	Conta
	Ligações
	Definições de notificação
	Exportar relatório
	Informações sobre o produto

Símbolo	Descrição
	Contacte-nos
	Manual de utilização
	Telefone
	E-mail
Ecrã inicial	
	Mensagem de advertência
	Predição de glicose baixa noturna disponível
	Predição de glicose baixa noturna não disponível
	Predição de glicose disponível
	Predição de glicose não disponível

Símbolo	Descrição
	Consultar as instruções de utilização em formato eletrónico
	Atenção, consulte as notas de segurança existentes nas instruções de utilização deste produto.
	Data de fabrico
	Dispositivo médico
	Fabricante
	Indica o representante autorizado na Suíça
	Identificação única do dispositivo
	Cumprir as disposições da legislação aplicável da UE

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 2026-05
1000062703(04)

ACCU-CHEK e ACCU-CHEK SMARTGUIDE são marcas comerciais da Roche.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e noutros países.

iOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Cisco nos EUA e noutros países.

Android, Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.

Todos os outros nomes de produtos e marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

© 2026 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



www.accu-chek.com